


Proctologie

Metalen Morgan proctoscoop

- Roestvrij staal
- Autoclaveerbaar
- Geleverd met obturator

Referenties	Lengte	ø
18154170	65 mm	17 mm
18154200	65 mm	20 mm

Made in Tuttlingen (DE)

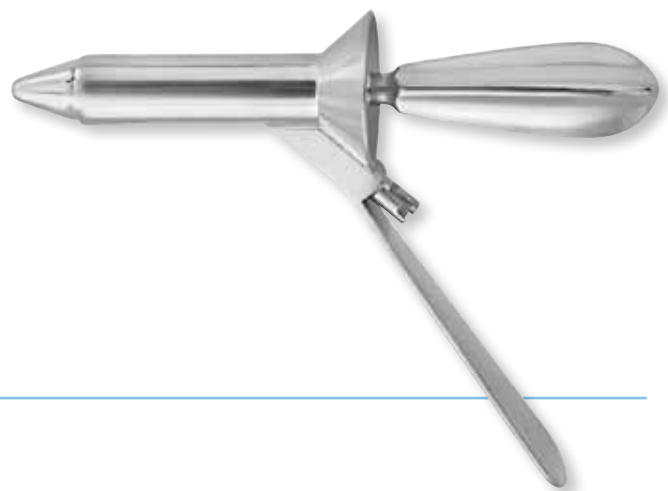

Lichtstaaf

- Roestvrij staal
- Autoclaveerbaar
- Voor gebruik met Morgan proctoscopen

Referentie

ER-18154260

Made in Tuttlingen (DE)



Hemorroideligator

- Roestvrij staal
- Autoclaveerbaar
- Kop 30° gebogen naar beneden
- Geleverd met metalen oplaadconus

Referentie

ER-18014100

Made in Tuttlingen (DE)



Ligaturen

- Bevat latex
- Per doos van 100 stuks

Referentie

ER-18080100



Anuscopen voor eenmalig gebruik



- Voor gebruik met Legrand handvat
- Individuele verpakking – niet steriel
- Per doos van 25 stuks

Referenties	Lengte	ø
OD-AUL17	60 mm	17 mm
OD-AUL22	60 mm	22 mm
OD-AUL24	60 mm	24 mm



- Met ingebouwde handvat
- Individuele verpakking – niet steriel
- Per doos van 25 stuks

Referenties	Lengte	ø
OD-AUP17	60 mm	17 mm
OD-AUP22	60 mm	22 mm
OD-AUP24	60 mm	24 mm

Legrand handvat

- Voor gebruik met de OD-AUL anuscopen
- Roestvrij staal
- Autoclaveerbaar

Referentie

ER-49481001

Made in Tuttlingen (DE)



Lichtklem

- Voor gebruik met de OD-AUP anuscopen
- Roestvrij staal
- Autoclaveerbaar

Referentie

ER-18108100


Made in Tuttlingen (DE)



Rectoscopen voor eenmalig gebruik

- Voor gebruik met Legrand handvat
- Individuele verpakking – niet steriel
- Per doos van 25 stuks

Referenties	Lengte	ø
OD-07AUR15	150 mm	15 mm
OD-07AUR20	200 mm	20 mm

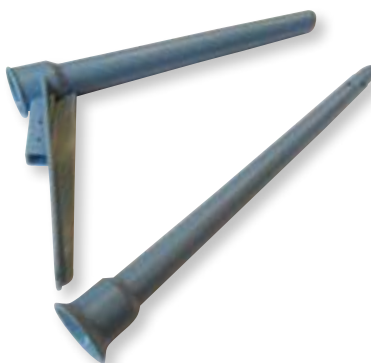

Dichtheidslensen

- Voor insufflatie tijdens rectoscopie
- Voor gebruik met de OD-07AUR rectoscopen
- Per doos van 25 stuks



Referentie

OD-07LENS

Lichtbron

Referenties
IL-8040012


- 150W halogeen
- Zeer eenvoudig gebruik
- Afmetingen 175 x 82,5 x 202 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Infrarood filter – elektronische start



Lichtkabel


- Aanpasbaar aan elk type lichtbron met de nodige adaptiestukken
- Lengte 230 cm
- Diameter 3,5 mm

Referentie
IL-8910005

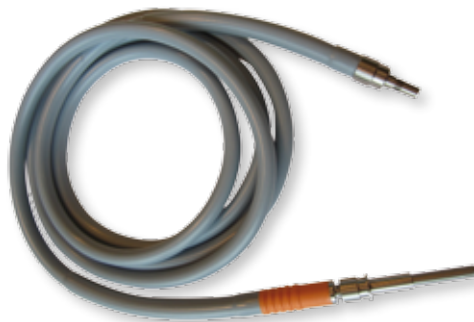

Adaptiestukken

- Voor lichtbronnen en instrumenten Wolf - Storz - Olympus enz.
- Gelieve ons te contacteren voor de referenties

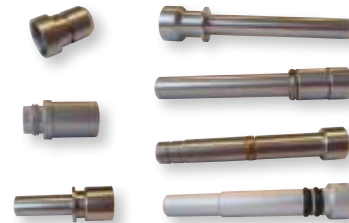

Infrarood coagulator



Kapjes

- Diameter van 2 tot 10 mm
- Teflon® of Sapphire
- Gelieve ons te contacteren voor de referenties



- Voor snel en eenvoudige behandeling van hemorroides
- Coagulatie in 1 à 3 seconden
- Kleeft niet aan de stof dankzij het Teflon® kapje
- Kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap
- Diepte van de necrose gemakkelijk instelbaar
- Lage spanning van de lamp (15 v)
- Geleverd met lichtstaaf en 2 kapjes

Referentie
LU-K151010



Lichtstaven

- Verschillende lichtstaven beschikbaar
- Diameter van 2 tot 10 mm
- Lengte van 70 tot 420 mm
- Gelieve ons te contacteren voor de referenties

Biopsiestangen voor rectoscopie

Herbruikbaar

Referenties		Lengte	ø
PD-16530001	met naald	300 mm	3 mm
PD-16530002	zonder naald	300 mm	3 mm

Voor eenmalig gebruik

- Per doos van 10 stuks

Referenties	Lengte	ø
OD-02RB32001	320 mm	3,7 mm



Naaldextensie

- Voor sclerosenaalden



Referentie

PD-16232610

Geconcentreerde was- en desinfectiemiddelen



Manuele pomp



Referenties	Fles van 2 L (goed voor 66 L oplossing aan 3%)	Bidon van 5 L (goed voor 166 L oplossing aan 3%)
INSTRUZYM	SS-4213200E	SS-4213300
ENDOSTAR	SS-4224200	SS-4224300
INSTRUPLUS	Geen 2 L verpakking	SS-4223300

INSTRUZYM

- Koud enzymatisch reinigingsproduct
- Verwijdert organische residuën
- Lost albumine en proteïnen op
- Voorkomt de verstopping van de kanalen van de endoscopen
- Te verdunnen aan 3% (150 ml per 5 L)

ENDOSTAR

- Koude desinfectans zonder aldehyden en phenolen
- Op basis van quaternaire ammoniak
- Speciaal ontwikkeld voor gevoelige medische instrumenten en endoscopen
- Ideaal voor ultrason reinigers
- Elke bad kan 30 endoscopen ontsmetten
- Oplossing blijft actief gedurende 14 dagen
- Te verdunnen aan 3% (150 ml in 5 L)
- Onderdompelingstijd: 15 minuten

INSTRUPLUS

- Koude desinfectans met aldehyden
- Zeer goede compatibiliteit met gevoelige instrumenten
- Voordelig gebruik
- Ideaal voor ultrason reinigers
- Oplossing blijft actief gedurende 14 dagen
- Te verdunnen aan 3% (150 ml in 5 L)
- Onderdompelingstijd: 15 minuten

n.v. ONIS s.a.

Chaussée de Louvain 592 • B-1380 Lasne • Belgium

Tel: 32 (0)2 357 07 07 • Fax: 32 (0)2 357 07 00

www.onis.com • admin@onis.com

